



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ORLAUF LING



Массажная накидка

**Сервисная поддержка**



**Актуальная инструкция**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Меры предосторожности</b>	<b>5</b>
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
<b>2. Комплектация</b>	<b>8</b>
<b>3. Распаковка</b>	<b>9</b>
<b>4. Устройство массажной накидки</b>	<b>10</b>
<b>5. Пульт управления</b>	<b>11</b>
<b>6. Эксплуатация массажной накидки</b>	<b>14</b>
6.1 Подготовка к использованию	14
6.2 Настройка массажа	14
<b>7. Устранение неисправностей</b>	<b>15</b>
<b>8. Спецификация</b>	<b>16</b>

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



*Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.*

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду — немедленно отключите его;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием, не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не защемлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;

- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

## 1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции, и не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.

- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.



### **1.3 Правила хранения и эксплуатации**

- Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 – Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Массажная накидка	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Адаптер кабеля питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

### 3. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Растегните ремень.
- Когда массажная накидка не используется, вы можете фиксировать ее при помощи ремня и хранить в коробке.

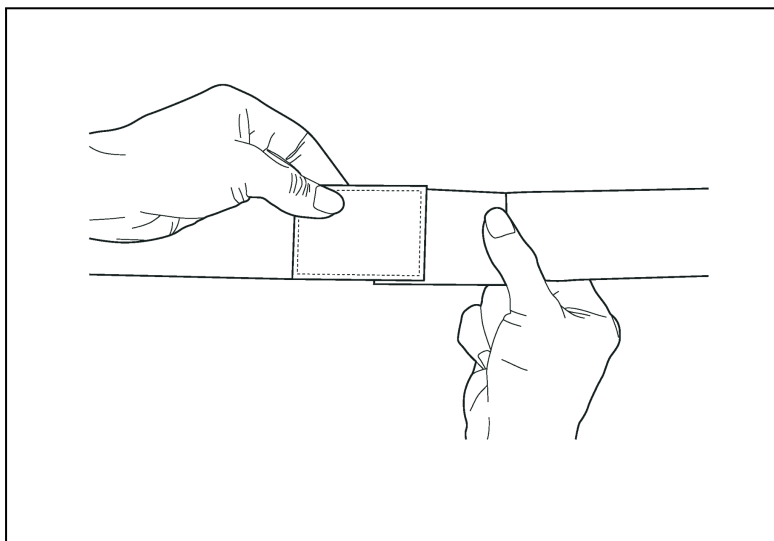


Рисунок 1 – Растегните ремень, чтобы раскрыть накидку

## 4. УСТРОЙСТВО МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

1. Зона массажа шеи.
2. Динамический роликовый массаж области спины.
3. Постукивающий роликовый массаж области поясницы.
4. Вибрационный массаж.
5. Пульт управления.
6. Адаптер кабеля питания.
7. Кабель питания.
8. Карман для пульта управления.



Рисунок 2 – Устройство массажной накидки

## 5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

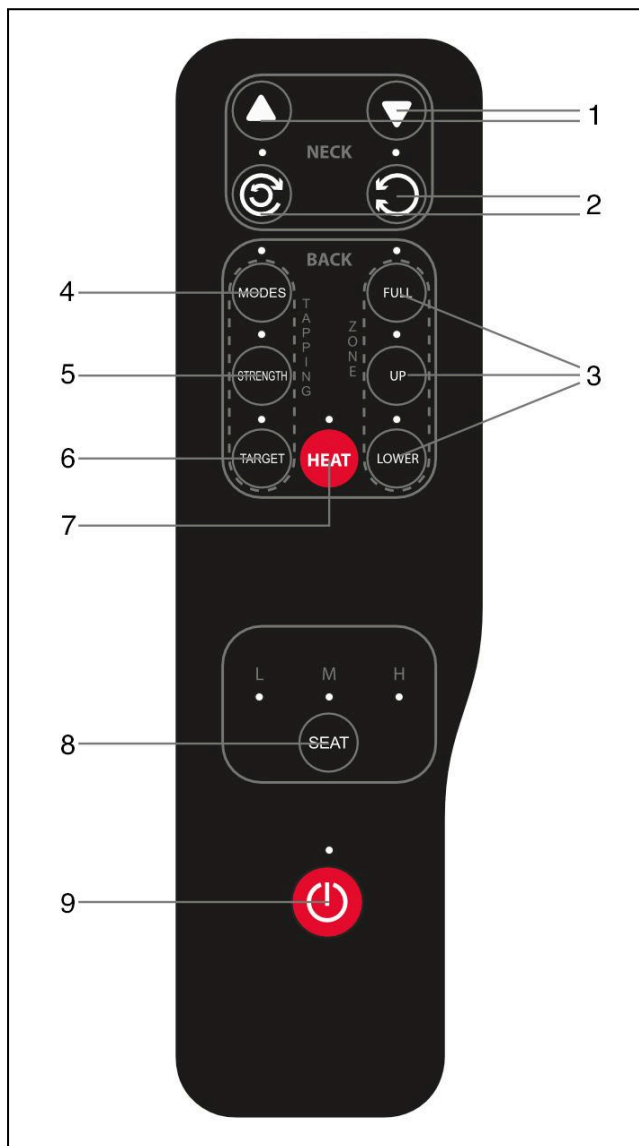




Рисунок 3 – Пульт управления

## **NECK (Массаж шеи)**

1. Настройка положения массажных роликов по высоте.

2. Регулировка направления вращения роликов:

-  — однократное нажатие включит вращение роликов по часовой стрелке; повторное нажатие включит вращение роликов против часовой стрелки;
-  — автоматическая смена направления вращения.

## **BACK (Массаж спины)**

3. **ZONE (Выбор зоны массажа спины):**

- FULL — массаж всей спины;
- UP — массаж верхней части спины;
- LOWER — массаж нижней части спины.

4. **MODES (Настройки роликового массажа).** Кнопка переключения режима массажа спины и поясницы. Выбор возможен только при работающем массаже спины. Каждое нажатие переключает режим в следующей последовательности:

- разминающий массаж в зоне спины и прерывистый постукивающий массаж в зоне поясницы - индикатор мигает медленно;
- разминающий массаж в зоне спины и непрерывный постукивающий массаж в зоне поясницы - индикатор мигает часто;
- прерывистый режим работы разминающего и постукивающего массажа - индикатор горит постоянно;

**5. STRENGTH (Настройка интенсивности массажа).** Кнопка переключения уровней интенсивности массажа спины и поясницы. Выбор возможен только при работающем массаже спины. Каждое нажатие переключает уровень в следующей последовательности:

- слабая интенсивность — индикатор мигает медленно;
- средняя интенсивность — индикатор мигает часто;
- высокая интенсивность — индикатор горит постоянно.

**6. TARGET.** Кнопка фиксации массажных роликов в нужном положении.

**7. HEAT.** Включение/выключение прогрева зоны шеи и поясницы.

**8. SEAT (Массаж ягодиц).** Кнопка переключения интенсивности вибрации в следующей последовательности:

- L — слабая интенсивность;
- M — средняя интенсивность;
- H — высокая интенсивность.

**9. Power.** Включение/Выключение питания. Выключить массажер можно в любой момент. Отключение питания во время работы приведет к тому, что ролики вернуться в исходное положение.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

### 6.1 Подготовка к использованию

- Разместите накидку на спинке устойчивого стула. Можно закрепить накидку на стуле при помощи ремня.
- Соедините кабель питания с адаптером. При этом должен раздаться характерный щелчок.
- Вставьте вилку адаптера в розетку (АС 220В, 50 Гц).
- Нажмите на кнопку Вкл/Выкл на пульте управления для включения устройства.

### 6.2 Настройка массажа

- Выберите программу массажа. Вы можете комбинировать роликовый массаж, прогрев и вибрационный массаж.
- Программа массажа будет запущена.
- Во время массажа можно включать и выключать прогрев и вибрационный массаж.
- После завершения массажа ролики вернутся в исходное положение.
- Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки, когда устройство не используется.



**Внимание!** Устройство автоматически отключается через 15 минут.

## 7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Звук.	Звук трения роликов об обивку спинки и мотора во время работы является нормальным явлением.	
Накидка не запускает программу.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствует питание.</li><li>2. Накидка перегрелась после продолжительного использования.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.</li><li>2. Дайте накидке остыть 30 минут. Нажмите кнопку включения.</li></ol>
Остановка роликов во время массажа.	Роликовый механизм перегружен.	Уберите чрезмерную нагрузку с роликов.

## 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Виды массажа</b>	вибрационный, классический, разминание, расслабляющий, роликовый, шиацу
<b>Механизм массажа</b>	роликовый, вибрационный
<b>Автопрограммы, шт</b>	3
<b>Кол-во роликов, шт.</b>	2 манипулятора с имитацией захвата руками в области шеи, 2 пары роликов в области спины и поясницы
<b>Прогрев</b>	да
<b>Вибромассаж</b>	да
<b>Пульт ДУ</b>	да
<b>Таймер</b>	15 минут
<b>Размер в рабочем виде (ДхШхВ), см</b>	47х46х80
<b>Размер в сложенном виде (ДхШхВ), см</b>	20х46х80
<b>Вес нетто, кг</b>	7,5
<b>Вес брутто, кг</b>	9
<b>Размер упаковки (ДхШхВ), см</b>	88х23х49
<b>Напряжение питания</b>	220В/12В 5А
<b>Мощность, Вт</b>	60

<b>Поставщик/Импортер</b>	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
<b>Завод-изготовитель</b>	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
<b>Страна изготовления</b>	КНР
<b>Дата изготовления</b>	Указана на этикетке
<b>Гарантия</b>	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте [www.orlauf.com](http://www.orlauf.com)

Сайт производителя <https://orlauf.com/>.



**ORLAUF**

