



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF LOON



Массажер для ног
с техникой гуаша

**Актуальная версия
инструкции**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Распаковка	8
4. Устройство массажера	9
5. Управление и функции массажера	10
6. Подготовка к эксплуатации	13
7. Устранение неисправностей	14
8. Спецификация	16

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Чтобы избежать риска травм, перегрева устройства или повреждения его компонентов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду; немедленно отключите его;
- не допускайте падения предметов на массажер;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием, не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не заземлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг

устройства;

- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции, и не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.
- После использования вытирайте пыль и грязь с массажера сухой мягкой тканью.
- Тканевую вставку для ног можно снять. Для нее подходит только ручная стирка. Не стирайте и не отжимайте ее в стиральной машине, также не сушите в сушильной машине.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 - Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Массажер для ног	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

3. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Когда массажер не используется, храните его в коробке, чтобы предотвратить повреждения и сохранить комплектность устройства.

4. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Панель управления.
2. Ручка для переноски.
3. Ручка для переноски.
4. Адаптер.

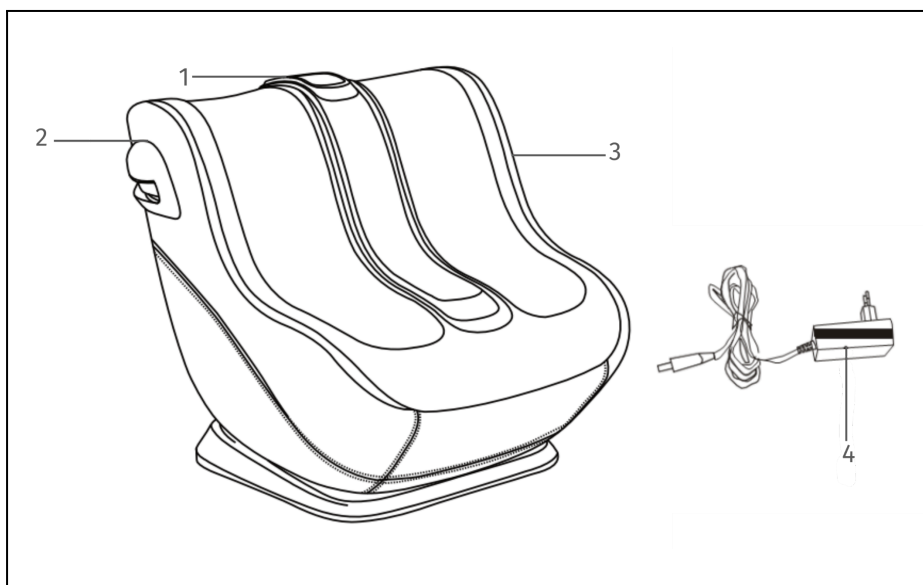


Рисунок 1 – Устройство массажера

5. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

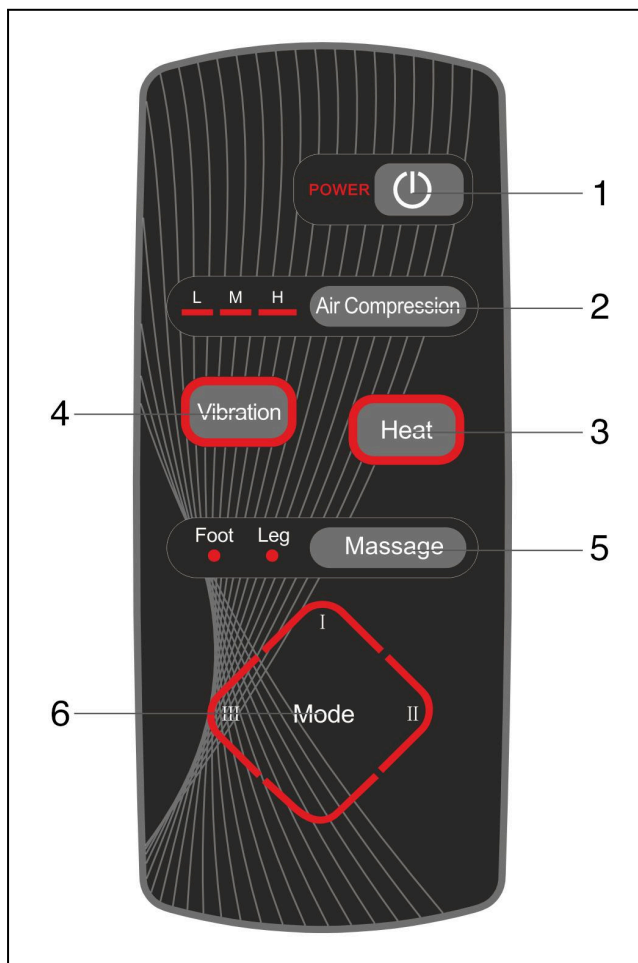


Рисунок 2 – Панель управления

1. Power (Вкл/Выкл). Кнопка включения и выключения массажера. Нажмите кнопку для включения массажера. Повторное нажатие на кнопку выключит массажер, либо он выключится через 15 минут работы автоматически.

2. Air Compression (Аэромассаж). Кнопка управления аэромассажем. Каждое нажатие на кнопку переключает интенсивность в следующей последовательности:

- L - малая интенсивность;
- M - средняя интенсивность;
- H - высокая интенсивность;
- отключение аэромассажа.

3. Heat (Прогрев). Кнопка включает и выключает прогрев стоп.

4. Vibration (Вибромассаж). Кнопка включает и выключает вибромассаж икр.

5. Scraping (Массаж гуаша). Кнопка включения и выключения массажа гуаша. Каждое нажатие на кнопку переключает режим массажа в следующей последовательности:

- массаж стоп;
- массаж икр;
- одновременный массаж стоп и икр;
- отключение массажа гуаша.

6. Mode (Режим). Кнопка запускает одну из трех автоматических программ. Выбранная программа будет подсвечена на панели в течение 2 секунд после активации. Каждое нажатие будет активировать автоматические программы в следующей последовательности:

- I (программа «Расслабление»). Разминающий роликовый массаж стоп и голеней с прерывистой вибрацией.
- II (программа «Здоровье»). Упор делается на глубокий и интенсивный роликовый массаж стоп, вибрационный массаж

будет работать в прерывистом режиме.

- III (программа «Восстановление»). Роликовый массаж работает в прерывистом режиме, мягкое разминание стоп и голеней, постоянный режим вибрации.



Примечание! Массажер оснащен регулировкой наклона. На левой ручке для переноски находится кнопка: удерживайте ее, чтобы отрегулировать наклон до желаемого положения, затем отпустите кнопку.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Разместите массажер на полу, на ровной и твердой поверхности.
- Соедините кабель питания с адаптером.
- Вставьте вилку адаптера в розетку (220В, 50 Гц).
- Нажмите на кнопку Вкл/Выкл для включения устройства.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не реагирует на нажатия кнопок.	1. Кабель питания не подключен. 2. Не нажата кнопка питания.	1. Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети. 2. Нажмите кнопку включения.
Звук	Шум роликов, воздушно-компрессионных подушек и моторов во время работы является нормальным явлением.	
Массажер внезапно перестал работать в процессе массажа.	1. Отсутствует питание.	1. Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.

	<p>2. Было выполнено несколько циклов по 15 минут.</p> <p>3. Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.</p> <p>4. На массажер было оказано сильное давление.</p>	<p>2. Дайте прибору остыть в течение 30 минут. Нажмите кнопку включения.</p> <p>3. Дайте прибору остыть в течение 15 минут. Нажмите кнопку включения.</p> <p>4. Попробуйте расслабить стопы и избегайте чрезмерного давления на массажер.</p>
--	--	---

8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	аэромассаж, вибрационный, гуаша, лимфодренажный, разминание, расслабляющий, роликовый
Механизм массажа	роликовый, airbag, скребковый, вибрационный
Автопрограммы, шт.	3
Кол-во роликов, шт.	роликовый массажный механизм на платформе и отдельные массажные барабаны в области стоп, голеней, икр
Кол-во воздушных подушек, шт.	16
Прогрев	да
Вибромассаж	да
Таймер	15 минут
Размер (ДхШхВ), см	53*49*50
Вес нетто, кг	12,5
Вес брутто, кг	15,5
Размер упаковки, см	60*56*56
Напряжение питания	220В/24В 2,5А
Мощность, Вт	60

Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China. +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orlauf.com

Сайт производителя <https://orlauf.com/>.



ORLAUF

