



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF RENEWAL



Портативный
массажер для головы
с зарядной базой

Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Распаковка	8
3. Устройство массажера	9
4. Управление и функции массажера	10
5. Зарядка массажера	11
7. Правила эксплуатации аккумулятора	12
8. Устранение неисправностей	13
9. Спецификация	14

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение. рис

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Чтобы избежать риска травм, перегрева устройства или повреждения его компонентов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- используйте массажер только по назначению, как указано в этом руководстве;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду;
- следите, чтобы во время зарядки массажера шнур для зарядки не перегибался, не перекручивался, не находился под натяжением и не прижимался посторонними предметами;
- не прикасайтесь к кабелю для зарядки мокрыми руками;
- держите шнур для зарядки подальше от нагретых поверхностей;
- заряжайте массажер только с использованием рекомендованных зарядных устройств и кабелей;
- не подключайте устройство к поврежденному источнику для зарядки;
- не накрывайте массажер во время работы и не используйте его под подушками или одеялами — это может привести к перегреву;
- не нажимайте повторно на кнопку питания в течение короткого промежутка времени;
- перед каждым использованием осматривайте корпус массажера; не используйте устройство при наличии видимых повреждений,

таких как трещины или вздутия;

- не допускайте падения предметов на массажер;
- убедитесь, что на устройстве или вашей одежде нет булавок, металлических застежек и других посторонних предметов;
- не разбирайте массажер и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, при неисправности обратитесь в сервисный центр;
- храните массажер в недоступном для детей месте.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции, и не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Храните массажер в безопасном и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 – Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Массажер для головы	1 шт.
Комплект сменных массажных насадок	1 шт.
База для зарядки массажера	1 шт.
Кабель питания с USB Type-C	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

3. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Перед первым использованием полностью зарядите массажер согласно инструкции из раздела «Зарядка устройства».
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

4. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Панель управления.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка управления вибромассажем.
4. Разъем Type-C.
5. Зарядная база.
6. Массажные манипуляторы.
7. Кабель для зарядки устройства Type-C.
8. Комплект сменных массажных насадок.

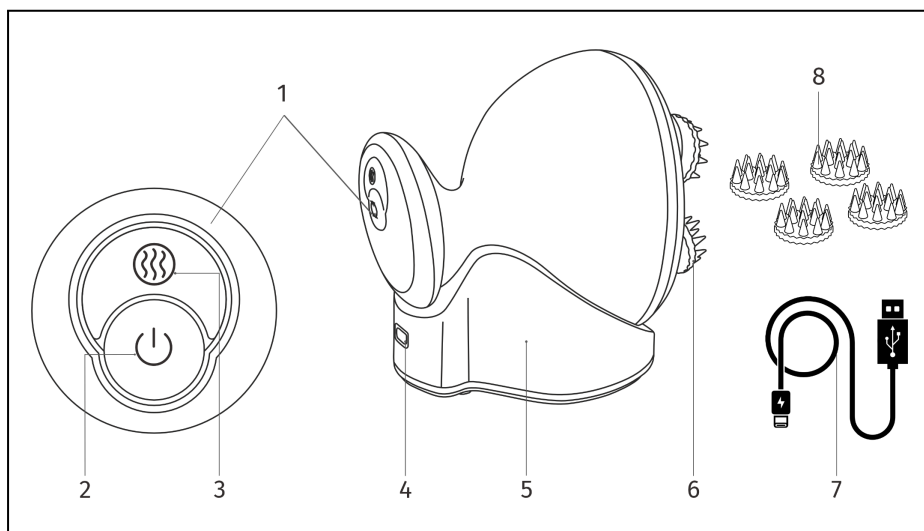


Рисунок 1 – Устройство массажера

5. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

Питание



- Нажмите кнопку питания для запуска массажера. Манипуляторы начнут работать на высокой скорости. Световая индикация будет постоянно гореть.
- Повторно нажмите для переключения на низкую скорость массажа. Световой индикатор будет мигать.
- Длительное нажатие (2-3 секунды) на кнопку питания отключает все функции.

Вибрация



- Нажмите кнопку для запуска режима вибрации с высокой интенсивностью.
- Повторно нажмите для переключения режима с низкой интенсивностью вибрации.
- Длительное нажатие (2-3 секунды) отключает режим вибрации.



Примечание! Сеанс массажа длится 10 минут, после чего массажер отключается автоматически.

6. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Подключите зарядный кабель к порту Type-C и к порту USB.
- Индикатор питания подсветится красным цветом, а после полной зарядки — зеленым. Будьте внимательны, разъем слегка нагревается во время зарядки.
- Полностью зарядите массажер перед использованием. Время зарядки составляет 3 часа.
- Отсоедините зарядный кабель после полной зарядки устройства.



Внимание! Массажер не должен использоваться во время зарядки. Проверьте уровень заряда до начала работы с массажером. Полностью зарядите массажер перед первым использованием.

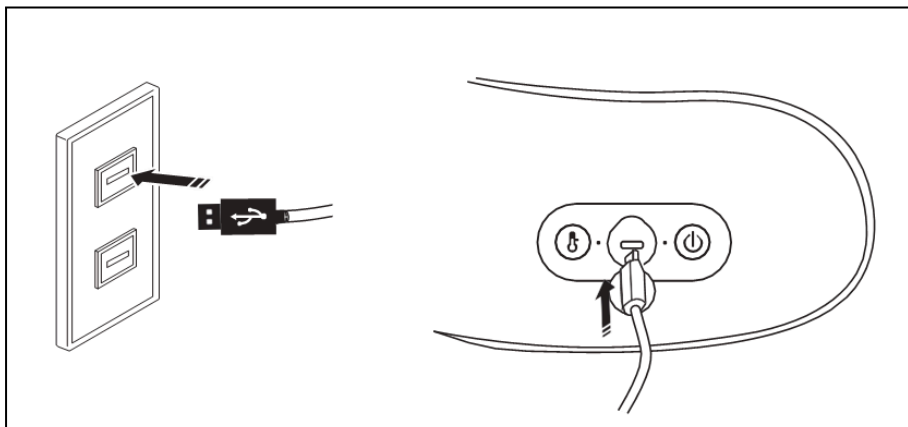


Рисунок 2 — Зарядка массажера

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумуляторов.

Обращение с аккумуляторами:

- при контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- никогда не бросайте аккумулятор в огонь - это может привести к взрыву;
- не разбирайте, не вскрывайте и не повреждайте аккумулятор;
- для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство из комплекта;
- перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор;
- всегда следите за тем, чтобы зарядка проходила правильно и безопасно.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 – Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	1. Низкий уровень заряда устройства. 2. Массажер только что завершил работу (прошло 10 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	1. Зарядите устройство. 2. Дайте прибору остыть в течение 20 минут. Нажмите кнопку включения.
Массажер перегревается.	Было выполнено несколько циклов по 10 минут.	Дайте прибору остыть в течение 30 минут. Нажмите кнопку включения.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	акупрессурный, акупунктурный, вибрационный, комбинированный, разминание, расслабляющий
Механизм массажа	массажные манипуляторы, вибрационный
Автопрограммы, шт	нет
Кол-во роликов, шт	4 силиконовых манипулятора
Прогрев	нет
Вибромассаж	да
Таймер	10 минут
Размер в рабочем виде (ДхШхВ), см	12x10x10
Размер в сложенном виде (ДхШхВ), см	12x10x12
Вес нетто, кг	0,5
Вес брутто, кг	0,5
Размер упаковки, см	18x15x12
Напряжение питания	220В/5В 1А
Мощность, Вт	5
Батарея, мАч	1000, 4,2В
Влагозащита	да

Поставщик/Импортер	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orlauf.com

Сайт производителя <https://orlauf.com/>.



ORLAUF

