



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF RENEWED BODY



Массажная накидка

Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Распаковка	9
4. Устройство массажной накидки	10
5. Пульт управления	12
6. Эксплуатация массажной накидки	15
6.1 Подготовка к использованию	15
6.2 Настройка массажа	15
7. Устранение неисправностей	16
8. Спецификация	18

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду — немедленно отключите его;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием, не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не заземлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;

- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции, и не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.

- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 – Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Массажная накидка	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

3. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Растегните ремень.
- Когда массажная накидка не используется, вы можете фиксировать ее при помощи ремня и хранить в коробке.

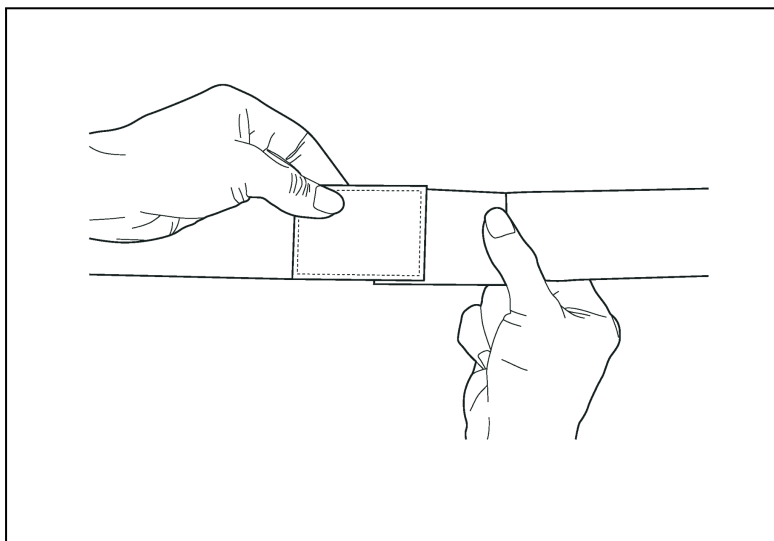


Рисунок 1 – Растегните ремень, чтобы раскрыть накидку

4. УСТРОЙСТВО МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

1. Зона роликового массажа шеи с подогревом.
2. Лимфодренажный массаж спины.
3. Роликовый массаж спины с подогревом.
4. Ремень фиксации.
5. Вибрационный массаж.
6. Лимфодренажный массаж ягодиц.
7. Лимфодренажный массаж бедер.
8. Шнур питания.
9. Пульт дистанционного управления.
10. Адаптер шнура питания.
11. Карман для хранения пульта дистанционного управления.

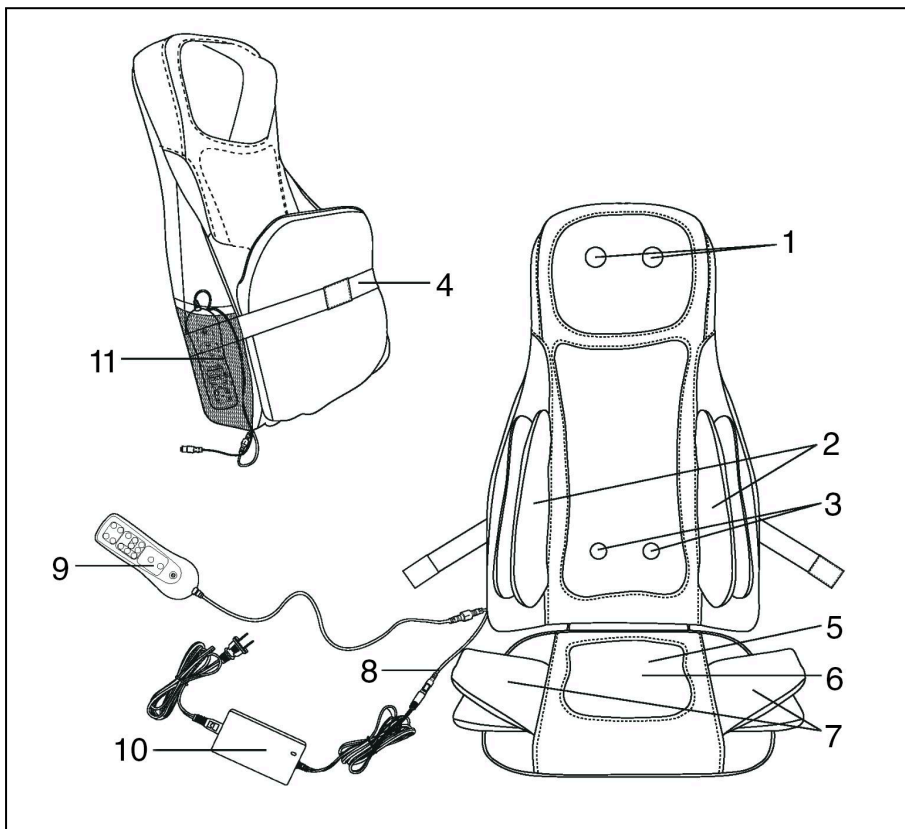


Рисунок 2 – Устройство массажной накидки

5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

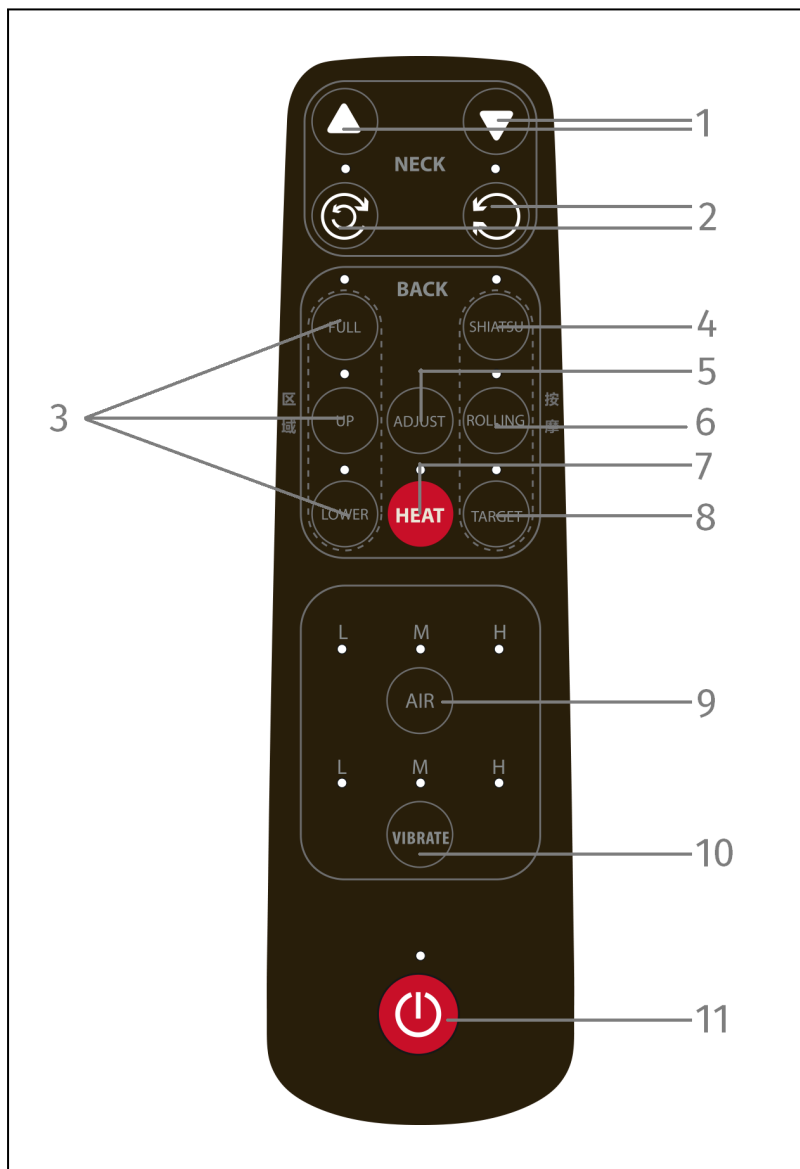




Рисунок 3 — Пульт управления

NECK (Массаж шеи)

1. Настройка положения массажных роликов по высоте.

2. Регулировка направления вращения роликов:

-  — однократное нажатие включит вращение роликов по часовой стрелке; повторное нажатие включит вращение роликов против часовой стрелки; зажмите кнопку, чтобы выключить ролики;
-  — автоматическая смена направления вращения; зажмите кнопку, чтобы выключить ролики.

BACK (Массаж спины)

3. **ZONE (Выбор зоны массажа спины):**

- FULL — роликовый массаж всей спины;
- UP — роликовый массаж верхней части спины;
- LOWER — роликовый массаж нижней части спины.

4. **SHIATSU (Шиatsu).** Включение и выключение массажа шиацу. В этом режиме кнопка **ADJUST** не работает.

5. **ADJUST.** Регулировка расстояния между роликами во время разминающего массажа.

6. **ROLLING.** Включение/выключение режима разминающего роликового массажа спины. Отрегулируйте расстояние между роликами кнопкой **ADJUST**.

7. **HEAT.** Включение/выключение прогрева зоны шеи и поясницы.

8. **TARGET.** Кнопка фиксации массажных роликов в нужном положении.

9. AIR. Кнопка переключения интенсивности лимфодренажного массажа всех зон в следующей последовательности:

- L — слабая интенсивность;
- M — средняя интенсивность;
- H — высокая интенсивность.

10. VIBRATION. Кнопка переключения интенсивности вибрационного массажа зоны ягодиц в следующей последовательности:

- L — слабая интенсивность;
- M — средняя интенсивность;
- H — высокая интенсивность.

11. Power. Включение/Выключение питания. Выключить массажер можно в любой момент. Отключение питания во время работы приведет к тому, что ролики вернуться в исходное положение.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

6.1 Подготовка к использованию

- Разместите накидку на спинке устойчивого стула. Можно закрепить накидку на стуле при помощи ремня.
- Соедините кабель питания с адаптером. При этом должен раздаться характерный щелчок.
- Вставьте вилку адаптера в розетку (АС 220В, 50 Гц).
- Нажмите на кнопку **Power** на пульте управления для включения устройства.

6.2 Настройка массажа

- Выберите программу массажа. Можно комбинировать следующие функции: роликовый массаж шеи, роликовый массаж спины, лимфодренажный массаж, прогрев и вибромассаж.
- Программа массажа будет запущена.
- Во время массажа можно регулировать расстояние между роликами, их положение относительно шеи, а также включать и выключать прогрев в зависимости от выбранных программ массажа.
- После завершения массажа ролики вернуться в исходное положение.
- Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки, когда устройство не используется.



Внимание! Устройство автоматически отключается через 15 минут.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Звук.	Звук трения роликов об обивку спинки и мотора во время работы является нормальным явлением.	
Накидка не запускает программу.	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствует питание.2. Накидка перегрелась после продолжительного использования.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.2. Дайте накидке остыть 30 минут. Нажмите кнопку включения.
Остановка роликов во время массажа.	Роликовый механизм перегружен.	Уберите чрезмерную нагрузку с роликов.

<p>Отключение подсветки прогрева.</p>	<p>Встроенная защита от перегрева.</p>	<p>При продолжительном использовании система отключит прогрев и подсветку на 5 минут, что позволит достаточно охладить механизм. Прогрев и подсветка включатся автоматически при достижении адекватной температуры.</p>
---------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	аэромассаж, лимфодренажный, разминание, расслабляющий, роликовый
Механизм массажа	роликовый, вибрационный, воздушно-компрессионный
Автопрограммы, шт	нет
Кол-во роликов, шт.	2 пары в области шеи, 2 пары в области спины
Прогрев	да
Вибромассаж	да
Пульт ДУ	да
Таймер	15 минут
Размер в рабочем виде (ДхШхВ), см	50x48x77
Размер в сложенном виде (ДхШхВ), см	77x48x23
Вес нетто, кг	8
Вес брутто, кг	9,5
Размер упаковки (ДхШхВ), см	81x24x50
Напряжение питания	220В/12В 5А
Мощность, Вт	60

Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orldaif.com

Сайт производителя <https://orldaif.com/>.



ORLAUF

